


Záchytné kapsy na tekutiny

Samolepící kapsy

Zachytávají tekutiny z operované oblasti. Kapsy jsou vyrobeny z pevné PE fólie. Jsou vybaveny adhezivní páskou na zadní straně kapsy k rychlému upevnění na roušku. Na přední části kapsy je tvarovací výztuha.


1-komorová záchytná kapsa

Kód	Rozměr (cm)
60-0101-S	22 x 29
60-0102-S	28 x 44
60-0103-S	28 x 55

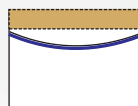


2-komorová záchytná kapsa

Kód	Rozměr (cm)
60-0124-S	25 x 28
60-0125-S	28 x 44

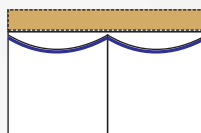

3-komorová záchytná kapsa


Kód	Rozměr (cm)
60-0149-S	28 x 44

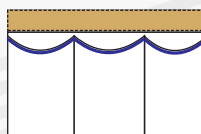

Kapsa pro neurochirurgii

Zachycuje tekutiny během operace. Zakulacený výřez na zadním dílu s adhezí umožňuje přizpůsobit nalepení kapsy tvaru hlavy. Přední část s tvarovací výztuhou přispívá k snadnému zachycení tekutin do kapsy.


Kód	Rozměr (cm)
60-0111-S	30 x 32

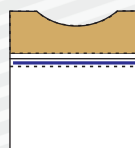

Záchytné kapsy s filtrem

Zadní část kapsy má adhezivní pásku, přední část vaku je vybavena tvarovací výztuhou. Kónická výpust' pro nasazení hadičky (6-10 mm průměr) je opatřena filtrem.

Kód	Rozměr (cm)	Equipment
65-0101-S	50 x 50	výpusť, filtr
65-0102-S	50 x 60	výpusť, filtr
65-0106-S	90 x 60	výpusť, filtr

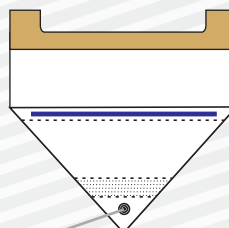

BARIÉROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ SÁLY

Doplňky operačních setů

Záchytné kapsy na tekutiny

Artroskopický vak pro operaci kolene, ramene

Vaky slouží k zachycení tekutin během artroskopie kolene nebo ramene.

Jsou vyrobeny z pevné PE fólie, vybaveny kónickou výpustí pro nasazení hadičky (6-10 mm průměr) a tvarovací výztuhou.

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
60-0122-S	60 x 100	2 pružné manžety



Záchytné vaky na císařský řez



Vyrobeny z pevné PE fólie.

Vybaveny adhezivní páskou kolem otvoru ve spodní části k fixaci vaku.

Vrchní část vaku je opatřena tvarovací výztuhou nebo pěnovým PUR lemem k zadržení tekutin během operace.

Na obou stranách vaku jsou kónické výpusti pro nasazení hadice (6-10mm průměr) nebo výpustní kanálek z PE fólie.

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
60-0106	80 x 100	PUR pěna
60-0107	80 x 100	plastová výztuha
60-0145-S	110 x 110	výpusť z PE fólie

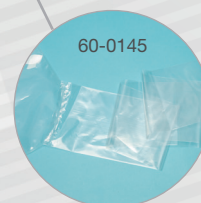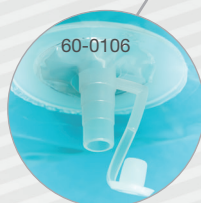

Záchytné vaky pro gynekologii

Vyrobené z PE fólie a dodávány v 1-komorovém nebo 2-komorovém provedení.

Všechny vaky mají tvarovací výztuhu na přední straně a adhezivní pásku na zadní straně k fixaci vaku na roušku.

V nabídce jsou i vaky s měřicí stupnicí, kónickou výpustí nebo výpustí z PE fólie.

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
60-0146-S	60 x 150	1-komorový vak bez měřítka, výpusť z PE fólie
60-0153-S	60 x 100	1-komorový vak s měřítkem, s kónickou výpustí
60-0148-S	60 x 100	2-komorový vak s měřítkem, s kónickou výpustí